



LM

feel the  
difference

 **Amdent**<sup>®</sup>  
Quality from Sweden



LMProPower

*Ultrazvuková brilantnosť a  
leštiaca sila*

**PRE NÁROČNÚ STOMATOLÓGIU**

# LM-ProPower

- VÝNIMOČNE VÝKONNÝ NÁSTROJ S VÝBORNOU ERGONOMIOU



## UltraLED

LM-ProPower UltraLED je kompaktný nástroj pre ultrazvukové ošetrovania. Vďaka jeho širokému rozsahu výkonu a rozmanitosti koncoviek, scaler je pozoruhodne nastaviteľný pre všetky procedúry. UltraLED je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám náročných profesionálov pri zachovaní vysokého komfortu pre pacienta.



## AirLED

LM-ProPower AirLED je prvý svetelný pieskovač na svete. Výkonné LED diódové osvetlenie, presný strek prášku a otočné dýzy zabezpečujú spoľahlivú a nepretržitú prevádzku, čo robí z pieskovača LM perfektný čistiaci nástroj pre rôzne oblasti zubného lekárstva.



## CombiLED

LM-ProPower CombiLED spája viaceré vlastnosti prístrojov AirLED a UltraLED do jedného kompaktného celku, čo zaručuje jeho široké využitie pri rôznych ultrazvukových a leštiacich ošetrovaniach. Jedná sa o výnimočný a výkonný nástroj, ktorý pozdvihne kvalitu Vašej práce do novej úrovne.

*LM-ProPower UltraLED a AirLED sú taktiež k dispozícii vo verzii „built-in“ s možnosťou zabudovania do Vašej dentálnej súpravy. Všetky zariadenia sú dostupné s konektorovým pripojením na centrálny rozvod vody alebo s pripojením na rýchlospojku so zásobníkom (fl'aškou) na medikamenty/vodu.*

## Tri atribúty excelentnosti – výnimočne výkonný nástroj s výborným držaním

ERGONOMIA • EKONOMIČNOSŤ • HYGIENA

### Prvotriedna ergonómia ručného násadca

LM-ProPower nástroje sú vybavené vynikajúcim LED osvetlením, ktoré efektívne osvetľuje ošetrovanú oblasť, zabezpečuje optimálnu viditeľnosť a redukcii únavy očí. Komfortný, nekízavý nástroj je dodávaný s vymeniteľným LM-ErgoGrip silikónovým návlekom. Vodná regulácia je zabudovaná v ultrazvukovom nástroji, čo zabezpečuje jednoduché a rýchle nastavenie vodného spreju.

### Výnimočná viditeľnosť s LED osvetlením





- Možnosť dvoch šošoviek – LM-ErgoGrip LED a Ohnisková "Focus LED"
- Najvýkonnejšie LED osvetlenie na trhu (70 000 lux)

LED osvetlenie neprodukuje žiadne teplo v nástroji a jeho životnosť je najmenej 100 000 hodín (30 rokov). Tento druh svetla efektívne osvetľuje ošetrovanú oblasť a garantuje výbornú viditeľnosť cez striekajúcu vodu či práškový sprej. LED osvetlenie zabezpečuje výborný kontrast, vďaka ktorému sú vodný kameň a škvrny viditeľnejšie.

### Vymeniteľné a autoklávovateľné silikónové návleky

LM-Ergo Grip LED so širokým šošovkovým prstencom a LM-ErgoGrip Focus LED so zaoštrou šošovkou, zaručujú komfortné, nekízavé držanie a výbornú citlivosť na presnú prácu. Návleky Ergo Grips sú vymeniteľné a autoklávovateľné a zopár návlekov Vám zabezpečí pohodlnú prevádzku ambulancie s kontinuálnym ošetrovaním mnohých pacientov.

## VÝBER NÁSADCOV LM/AMDENT

	<p><b><i>LM-ProPower UltraLED</i></b></p> <p>Násadec ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa          LED lampa          Snímateľný a sterilizovateľný násadec          Snímateľný a sterilizovateľný ErgoGrip          2 ErgoGrip verzie, šošovky Standard alebo Focus          Ovládač vody na násadci          Dostupný v stolnej verzii ProPower a ako zabudovaný</p>
	<p><b><i>LM-ProPower AirLED</i></b></p> <p>Násadec pieskovač          LED lampa          Snímateľný a sterilizovateľný ErgoGrip          2 ErgoGrip verzie, šošovky Standard alebo Focus          Snímateľné a sterilizovateľné trysky          2 verzie trysiek, univerzálna a kolienková          Dostupný v stolnej verzii ProPower a ako zabudovaný</p>
	<p><b><i>Amdent Ergo UltraLED</i></b></p> <p>Násadec ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa          LED lampa          Nesterilizovateľný násadec          Odpojiteľný nástavec pri údržbe          Snímateľný a sterilizovateľný ErgoGrip          2 ErgoGrip verzie, šošovky Standard alebo Focus          Bez ovládača vody na násadci          Dostupný v stolnej verzii US30 a ako zabudovaný</p>
	<p><b><i>Amdent Ergo Basic</i></b></p> <p>Násadec ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa          Snímateľný a sterilizovateľný ErgoGrip          1 ErgoGrip verzia Basic          Neodpojiteľný násadec          Nesterilizovateľný násadec          Bez LED lampy          Bez ovládača vody na násadci          Dostupný v stolnej verzii US30 a ako zabudovaný</p>




# TYPOVÝ RAD ULTRAZVUKOVÝCH KONCOVIEK LM/AMDENT

## - najvyššia kvalita pre všetky vaše potreby

Úplný typový rad 69 koncoviek – riešenia pre parodontológiu, endodontiku, apikálnu chirurgiu a rekonštrukčné ošetrenia

- Odstraňovanie zubného kameňa
- Minimálne invazívne reštaurovanie
- Endodontika
- Apikálna chirurgia
- Špeciálne účely
- Sterilné ošetrenie

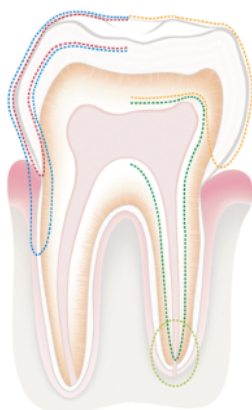

### Kódovanie prac. režimu

- Max 40 %  
Endo function Max 60 %  
(LM-PowerHand)
- Max 70 %
- Max 100 %



## Najobľúbenejšie koncovky

Koncovky sú kompatibilné so všetkými ultrazvukovými stolnými a vstavanými prístrojmi LM a Amdent.

<p><b>PE-37</b></p> <p>Univerzálna koncovka Supragingiválne a subgingiválne odstraňovanie zubného kameňa Dosahuje do hlbokých váčkov a rozvetvení Jedna z najobľúbenejších koncoviek</p> <p>Pracovný režim </p>	<p><b>PE-39</b></p> <p>Odstraňovanie silného kameňa Lingválne, bukálne a supragingiválne odstraňovanie zubného kameňa Jedna z najobľúbenejších koncoviek</p> <p>Pracovný režim </p>
<p><b>PE-40H</b></p> <p>Hlbšie subgingiválne odstraňovanie Vhodné pre lingválne odstraňovanie kameňa z rezákov Dosahuje tiež do hlbokých váčkov a rozvetvení</p> <p>Pracovný režim </p>	<p><b>PE-38</b></p> <p>Subgingiválne odstraňovanie Vhodné aj pre supragingiválne jemné odstraňovanie zubného kameňa a odstraňovanie škvŕn Lingválne a bukálne odstraňovanie zubného kameňa</p> <p>Pracovný režim </p>
<p><b>PE-41PF</b></p> <p>Používa sa na lingválne, bukálne a aproximálne supragingiválne odstraňovanie zubného kameňa</p> <p>Pracovný režim </p>	<p><b>PE-41PS</b></p> <p>Hlbšie subgingiválne odstraňovanie Lingválne a bukálne odstraňovanie Vhodné tiež pre supragingiválne jemné odstraňovanie zubného kameňa a odstraňovanie škvŕn</p> <p>Pracovný režim </p>

Dalšie informácie nájdete v Tip Book na [www.lminstruments.com](http://www.lminstruments.com)