


■ simple&smart



simple&smart
one

A plus in your clinic

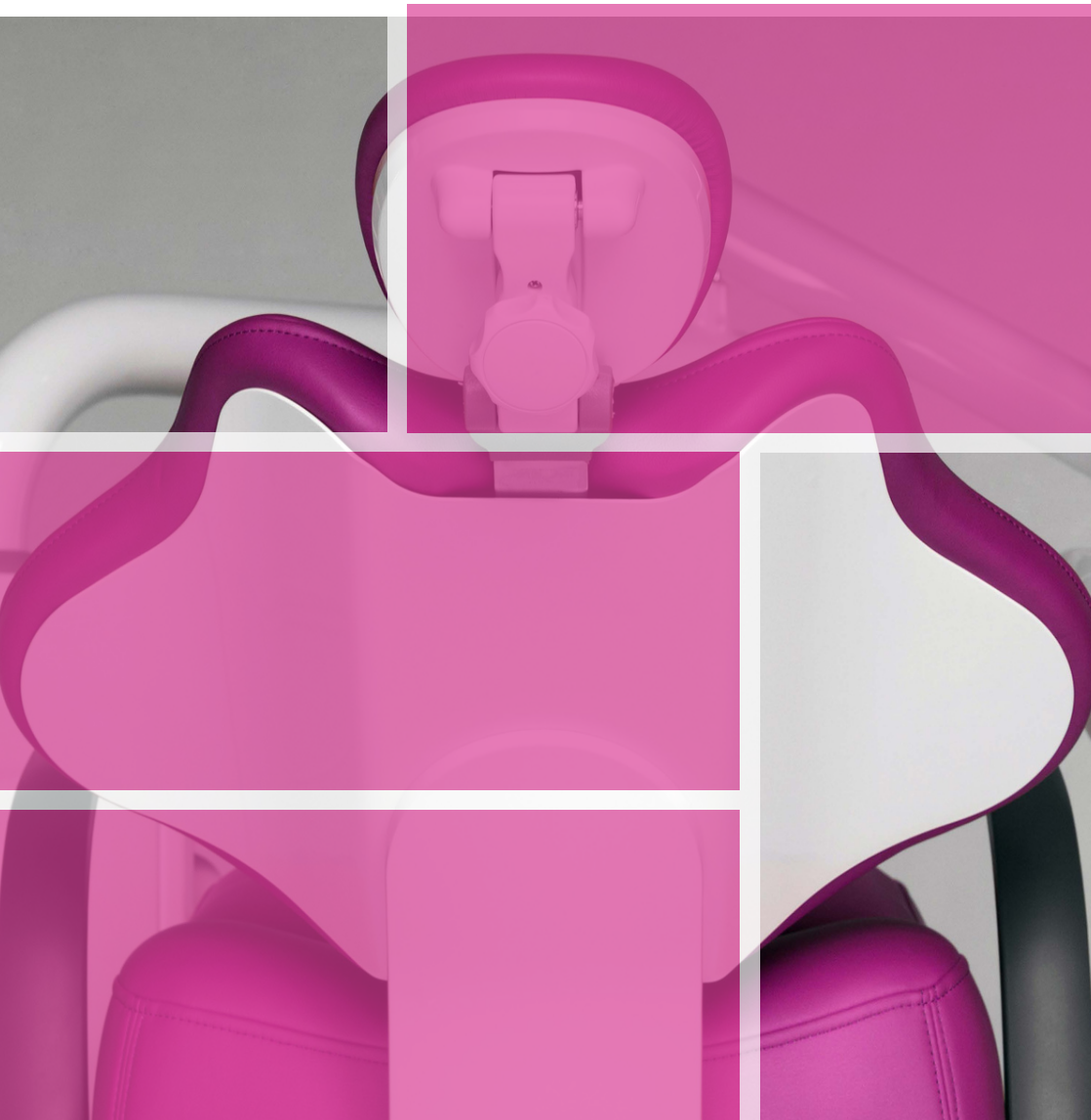

Jednoduchá zvnútra
menej technickej pomoci
jendoduchá inštalácia
menej elektroniky
pre spoľahlivejšiu súpravu

Preto sme
simple&smart



**VLAS
TNOS
TI**

POHODLNÉ & ÚTULNÉ

zlepšujúce ergonómiu



Sedadlo a **operadlo** boli navrhnuté tak, aby **zlepšili pohodlie a stabilitu pacienta** na kresle. Špeciálna ergonómia umožňuje lekárovi pracovať vo vhodnejšej polohe. Práca v polohe 12 hodín bude jednoduchšia.


Konštrukcia chrbtovej **opierky** je kovová a jej extra tenké prevedenie zlepšuje ergonómiu sedenia a výrazne uľahčuje prístup lekára k pacientovi, čím sa lekár dostane **do lepšej pracovnej polohy**.

Dizajn **základne kresla** umožňuje širší pohyb sedadla. Je tenká a umožňuje kreslu dosiahnuť **nižšiu polohu**, poskytuje širší pracovný priestor a zlepšuje pohodlie lekárov pri každodennej praxi.

**VLAS
TNOS
TI**

ODOLNÁ štruktúra

výkonné vlastnosti

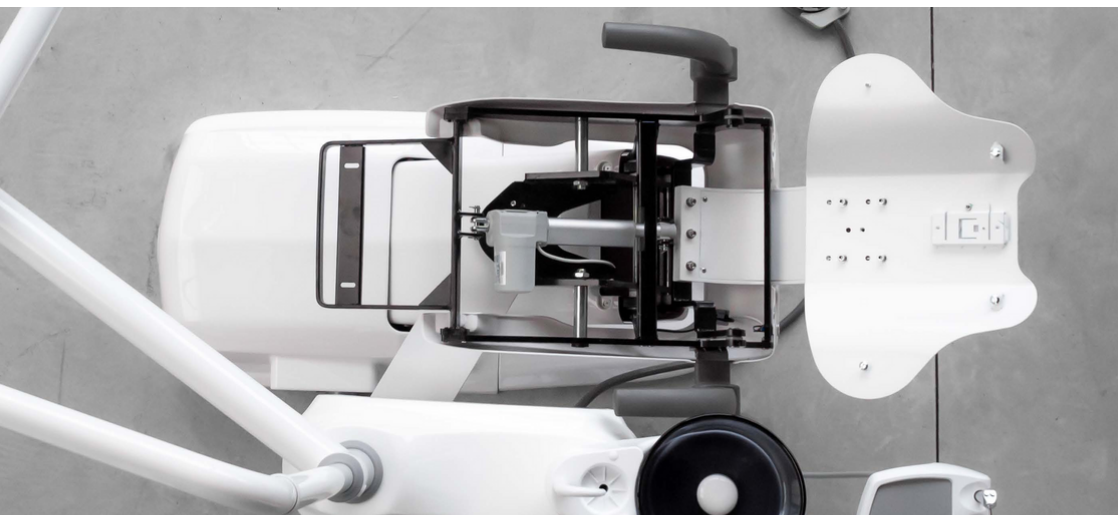

Konštrukcia súpravy je postavená tak, aby vydržala, je pevná a odolná, ktorá zaisťuje dokonalú stabilitu a odolnosť. **Plúvadlový blok** je možné **vyklopiť** tak, aby umožnila lekárovi pracovať aj v "3 hodinách" alebo umožnila **lepší prístup** asistenta.

Vnútoraná konštrukcia plúvadlového bloku a najkrehkejšie časti stomatologickej súpravy sú kompletne vyrobené z **hliníka**. Táto vlastnosť umožňuje znížiť hmotnosť stoličky, čím uľahčuje riadenie pohybu. Zabraňuje tiež tvorbe hrdze a poskytuje

väčšiu odolnosť tým častiam, ktoré sú najviac vystavené opotrebovaniu. **SS_ONE** je vybavený dvojíťmi nádržami a to na čistú vodu a na dezinfekčný systém.

Vo vnútri plúvadlového bloku je **nádrž** na dezinfekciu a druhá väčšia nádrž mimo plúvadlového bloku s objemom 2 litre na zásobovanie čistou vodou.


Pre každú odsávaciu kanylu sú dva oddelené **vzduchotesné filtre**.

Čerešničkou na torte sú nové výkonnejšie a menej hlučné motory.

simple&smart

KISS 

Keep It Simple & Smart

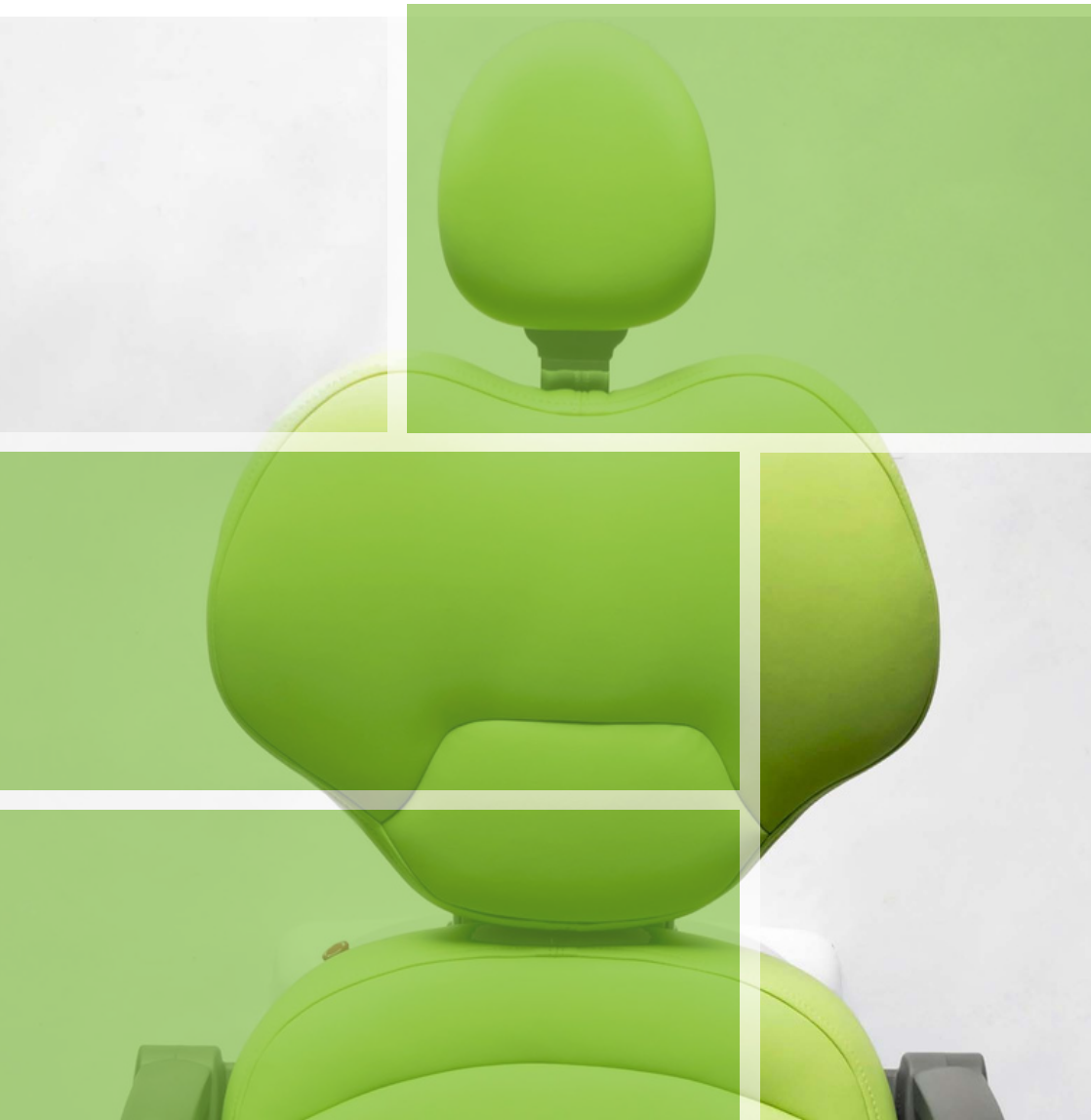

Jednoduchá zvnútra
menej technickej pomoci
jendoduchá inštalácia
menej elektroniky
pre spoľahlivejšiu súpravu

Preto sme
simple&smart



**VLAS
TNOS
TI**

POHODLNÉ & ÚTULNÉ

zlepšujúce ergonómiu



Sedadlo a **operadlo** boli navrhnuté tak, aby **zlepšili pohodlie a stabilitu pacienta** na kresle. Špeciálna ergonómia umožňuje lekárovi pracovať vo vhodnejšej polohe. Práca v polohe 12 hodín bude jednoduchšia.

Konštrukcia chrbtovej **opierky** je kovová a jej extra tenké prevedenie zlepšuje ergonómiu sedenia a výrazne uľahčuje prístup lekára k pacientovi, čím sa lekár dostane **do lepšej pracovnej polohy**.

Dizajn **základne kresla** umožňuje širší pohyb sedadla. Je tenká a umožňuje kreslu dosiahnuť **nižšiu polohu**, poskytuje širší pracovný priestor a zlepšuje pohodlie lekárov pri každodennej praxi.

**VLAS
TNOS
TI**

ODOLNÁ štruktúra

výkonné vlastnosti



Konštrukcia súpravy je postavená tak, aby vydržala, je pevná a odolná, ktorá zaisťuje dokonalú stabilitu a odolnosť. Pľuvadlový blok je možné **vyklopiť** tak, aby umožnila lekárovi pracovať aj v “3 hodinách” alebo umožnila **lepší prístup** asistenta.

Vnúťorná konštrukcia pľuvadlového bloku a najkrehkejšie časti stomatologickej súpravy sú kompletne vyrobené z **hliníka**. Táto vlastnosť umožňuje znížiť hmotnosť stoličky, čím uľahčuje riadenie pohybu. Zabráňuje tiež tvorbe hrdze a poskytuje

väčšiu odolnosť tým častiam, ktoré sú najviac vystavené opotrebovaniu.

SS KISS je vybavený dvojitémi nádržami a to na čistú vodu a na dezinfekčný systém.

Vo vnútri pľuvadlového bloku je **nádrž** na dezinfekciu a druhá väčšia nádrž mimo pľuvadlového bloku s objemom 2 litre na zásobovanie čistou vodou.

Pre každú odsávaciu kanylu sú dva oddelené **vzduchotesné filtre**.

Čerešničkou na torte sú nové výkonnejšie a menej hlučné motory.

KISS

široký
výber
možností

ONE



KONFIGURÁCIA

Prispôsobte si PRIESTOR

vyberte si to, čo potrebujete

Na základe svojich zvyklostí si môžete vybrať, ktorý druh stolíka lekára s nástrojmi je pre vás vhodnejší.

Výber **pľuvadlovej misy** je tiež na vás: pľuvadlová misa z tmavého skla je odnímateľná, aby sa zjednodušilo jej čistenie.

ZÁVESNÝ TYP vedenia



VRCHNÝ TYP vedenia



KERAMICKÉ PĽUVADLO



SKLENENÉ PĽUVADLO

Bez ohľadu na to, čo si vyberiete, nebudú žiadne dodatočné náklady.



ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

- Ergonomické pohyblivé **kreslo** s Linak motorom
- Autoklávovateľné silikónové **tácky**
- Ľavú opierku ruky (pravá opierka ako voliteľná opcia)
- **5 nástrojový stôl lekára**: 1x 3F striekačka, 1x nesvetelný Woodpecker odstraňovač zubného kameňa (5 koncoviek zadarmo), 2x svetelná hadica turbíny, 1x nesvetelná hadica (pripojenie Midwest)
- **Nástrojový stôl asistenta**: 1x 3F striekačka, odsávanie (odsliňovač a odsávačka) s dvoma vzduchotesnými filtrami
- **Ovládací panel na stolíku lekára**: ovládanie kresla (3 programovateľné pozície (pozícia trendelenburg, pôvodná pozícia a posledná pozícia), zapnutie – vypnutie svetla, plnenie pohára, oplach plúvadlovej misy, aktivovanie ohrev vody, aktivácia negatoskopu.
- **Ovládací panel asistenta**: ovládanie kresla, pôvodná pozícia, posledná pozícia, zapnutie-vypnutie svetla, plnenie pohára, oplach plúvadlovej misy, ohrev vody
- **Multifunkčný pneumatický nožný ovládač**: aktivovanie nástrojov (plynulá regulácia elektr. mikromotora), ovládanie kresla, vy/zapnutie chladenia nástrojov, plnenie pohára, oplach plúvadlovej misy
- **Dvoj flaša** : Systém čistej vody (destilovaná voda) + systém dezinfekcie hadíc nástrojov
- **ECO LED** svietidlo so senzorom, reguláciou intenzity (30 000 Luxov)
- **Stolička lekára** – 3nastavenia a nastavenie opierky chrbta
- PU **koža** (bezšvová)
- 1 ročná **záruka** (možnosť predĺženia až na 5 rokov)
- Linak alebo t-Motion motor

MOŽ NOS TI

príslušenstvo

svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba



FIBER KOŽA

Väčší komfort so švami! Štandardné čalúnenie z PU kože sa vyrába bez švov, aby sa ľahšie čistil. Na druhej strane sedák z Fiber koženky zaručí vašim pacientom **vyšší pocit pohodlia**. K dispozícii je štandardná škála farieb, ale môžete si ju prispôbiť aj výberom v rozsahu viac ako 200 farieb.



EXTRA STOLIČKA

Táto extra stolička môže byť vhodná pre vášho **asistenta**. Rôzne farby sú k dispozícii, aby vyhovovali vašim požiadavkám a vašim potrebám.



PRAVÁ OPIERKA

Pravá opierka ruky nie je súčasťou štandardnej konfigurácie, pretože mnohí lekári ju radšej nemajú. Avšak si chcete zvýšiť komfort pacienta, môžete si ho pridať na svoje prispôbené kreslo.

MOŽNOSTI

príslušenstvo
svietidla
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba

ECO LED PEBBLE

Vybavený senzorom pre reguláciu intenzity. Intenzita tohto svietidla môže dosiahnuť 30 000 luxov. Táto lampa, ktorá sa ľahko čistí a má príjemný dizajn, je dokonalým príkladom vynikajúcej hodnoty za peniaze.



LED LAMP EVA

Vysokokvalitná LED lampa - svetivosť od 300 do 50 000 luxov. Môžete si vybrať ideálnu teplotu farby pre zubnú prax: 5700k, 5000k, 4000k a 2700k. Patentovaný, jedinečný, odrazený svetelný bod, ktorý zabráňuje oslneniu pacientov. Jeho 3D rotácia hlavy o 360 umožňuje osvetliť každý kútik úst.



Made by **FARO** - Italy

LED LAMP MAIA

Vysokokvalitná LED lampa, od 3000 do 45 000 luxov. Maia je ideálnou voľbou pre všetkých zubných lekárov, ktorí hľadajú profesionálnu LED lampu, spoľahlivé riešenie s dlhou životnosťou a s vysokým výkonom osvetlenia za konkurencieschopnú cenu. Presná definícia svetelného bodu zubnej lampy Maia eliminuje riziko oslnenia a chráni oči pacientov a lekárskeho tímu.



Made by **FARO** - Italy

MOŽNOSTI

príslušenstvo
svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba

ENDOSCOPE KIT

- **Monitor** 24 V, farba, 15", s ochranou skla
 - **Intraoral USB kamera** : Vysoké rozlíšenie, automatické zaostrovanie a myš, LED osvetlenie
 - **Súprava ramien** pre inštaláciu monitora
- MONITOR a KAMERA** sú inštalované na stomatologickej súprave pomocou špeciálnej sady tyčí. Kamera má USB pripojenie a umožňuje ukladať snímky na pamäťovú kartu SD. Táto kamera s vysokým rozlíšením (1280x720) je vybavená automatickým zaostrovaním a myšou. LED osvetlením s 3 rôznymi úrovňami intenzity. Hlava kamery sa môže otáčať o 280, táto funkcia uľahčuje vašu prácu a znižuje nepohodlie pre pacienta. Súprava endoskopu je dokonalým riešením, ako ukázať svojim pacientom vašu prácu v reálnom čase.



SUPERMEDIA KIT



- **Panel PC** Je zabudovaný do súpravy, dotyková obrazovka, bezdrôtová myš a klávesnica
 - **USB Kamera** Sa pripája k dotykovému PC
Made by CARESTREAM - France
 - **Súprava ramien** pre inštaláciu monitora
- PANEL PC a KAMERA** je možné nainštalovať aj samostatne, ale najlepším riešením je použiť ich spolu. Počítač je dotykový a funguje ako bežný počítač. Internetové pripojenie, RVG systém, endokameru a všetky riadiace programy je možné ovládať priamo z vašej súpravy. Kombinácia s kamerou umožňuje získať a uložiť všetky obrázky, ktoré potrebujete.

MOŽ NOS TI

príslušenstvo
svietidla
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba



LUZZANI STRIEKAČKA

rovná alebo uhlová
3 alebo 6 funkcií



CHIRANA TGL 637 A

svetelný turbínový násadec



CHIRANA MULTIFLEX 420

rýchlospojka



110 D

CHIRANA

1:1
rovný
násadec



120 LB

CHIRANA

1:1
svetelný
násadec



120 LR

CHIRANA

1:5
svetelný
do rýchla



TG 656 EASY

CHIRANA

turbínový
násadec



TGL 656 EASY

CHIRANA

svetelný
turbínový
násadec

MOŽNOSTI

príslušenstvo
svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba

Stolík lekára môže byť vybavený jedným alebo viacerými mikromotormi. Mikromotory môžu byť pneumatické alebo elektrické v závislosti od požiadaviek každého zákazníka. Na tieto mikromotory je možné použiť mikromotorové násadce od všetkých značiek.

TKD PNEUMATICKÝ MIKROMOTOR



Pneumatický mikromotor bez osvetlenia, 20 000ot/min., vnútorný sprej. Pneumatický mikromotor je možné priamo aplikovať na hadicu turbíny bez akejkoľvek riadiacej jednotky. Rýchlosť je možné ovládať pedálom alebo manuálne na násadci.

TKD ELEKTRONICKÝ MIKROMOTOR

Definitive LED model so svetlom, vnútorný sprej, bezuhlíkový systém, 40 000 ot/min. Ak nie je zvolený žiadny ovládací panel, rýchlosť mikromotora sa ovláda jednoducho pomocou pedálu. Ovládanie spätného chodu je manuálne. Neexistuje žiadne digitálne ovládanie krútiaceho momentu.



MOŽNOSTI

príslušenstvo
svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba

OVĽADACÍ PANEL PRE ELEKTRICKÉ MIKROMOTORY

Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad mikromotorom, môžete si vybrať medzi dvoma ovládacími panelmi, analógovým alebo digitálnym dotykovým. Oba panely dokážu ovládať aj dva elektrické mikromotory.

TKD LCD DIGITAL DUOPAD

Digitálny panel umožňuje ovládať rýchlosť, krútiaci moment, otáčanie a svetlo mikromotora. Ovládanie je digitálne a prebieha prostredníctvom špeciálneho dotykového displeja. S týmto riešením nie je možné dosiahnuť viac funkcií.



TKD ANALOG DUOPAD s tlačidlami

Analógový panel umožňuje rovnaké ovládanie ako digitálny, ale analógový duopad tiež poskytuje možnosť väčšieho využitia pamäte. Výhodou analógového systému je jednoduchosť výberu pomocou tlačidiel.





STANDARD CONFIGURATION

- Plne digitálny dotykový 7" LCD displej:
 - Domovská obrazovka s tlačidlami na ovládanie kresla
 - Určená oblasť na ovládanie mikromotora a UOZK
 - Viac pamäte pre nastavenie násadcov
 - Možnosti nastavenie pre 5 užívateľov
 - 1 BienAir MCX elektronický mikromotor
 - 1 MCX hadica mikromotora

2 MOTORS CONFIGURATION

STANDARD CONFIGURATION

- Druhý BienAir MCX elektronický mikromotor
- Druhá MCX hadica mikromotora

3 MOTORS CONFIGURATION

STANDARD CONFIGURATION

- +2 BienAir MCX elektronický mikromotor
- +2 MCX hadica mikromotora

MOŽNOSTI

príslušenstvo
svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie
nástrojový vozík
údržba

Na všetky naše stomatologické súpravy inštalujeme odsávacie systémy **DÜRR** podľa špecifických požiadaviek každého zákazníka a podľa typu odsávacieho systému prítomného na klinike. Naše stomatologické súpravy sú štandardne vyhotovené tak, aby bolo možné ich pripojenie k odsávacím zariadeniam pre suché alebo mokré odsávanie. **Okrem toho je možné naše súpravy integrovať s:**



1. CAS1

Tento systém odsávania umožňuje spojiť nižšie uvedené opcie (body 2,3,4). Má tiež integrovaný separátor amalgámu. **Toto riešenie je dostupné len pre SS ONE súpravu!**



2. CS1 VZDUCH/VODA SEPARATOR

Tento odsávací systém umožňuje pripojenie k motoru suchého sania.

3. VENTIL MIESTA

V prípade viacerých súprav (2 alebo viac jednotiek pripojených k jednému saciemu motoru)



4. VENTIL PLŮVADLOVEJ MISY

Na vedenie odtoku z umývadla smerom k odsávačke (v prípade, že v plúvadlovom bloku kresla je len jedna hadica)

5. VENTURI SYSTEM

Montuje sa v situáciách, keď nie je k dispozícii odsávacie zariadenie.

Pred objednaním súpravy je veľmi dôležité analyzovať situáciu na klinike!

MOŽ NOS TI

príslušenstvo
svietidlá
media kit
násadce
mikromotory
odsávanie

nástrojový vozík
údržba



Náhradou za stolík lekára môžete mať svoju stomatologickú súpravu s vozíkom na nástroje. Vozík má rovnaké vybavenie ako stolík lekára.

• **päť hadicový modul na podnose pre lekárov:**

- 1 striekačka s 3 funkciami
- 1WP odstraňovač zubného kameňa, EMS kompatibilný s 5 koncovkami
- 3 hadice (2 s optickým vláknom, 1 bez optického vlákna) midwest typ

• **ovládací panel s 15 funkciami**

• **negatoskop**

FARBY

JE TO VEC FARBY

Štandardný PU, alebo Fiber koža a viac ako 200 prispôsobených farieb:
Simple&Smart má najširší výber čalúnenia, aké ste kedy videli!

Štandardné PU polyuretánové čalúnenie je dostupné bez dodatočných nákladov. Štandardná PU koža je bezšvová pre jednoduchšie čistenie. S malým príplatkom si môžete vybrať elegantné čalúnenie Fiber Leather so švami, ktoré vašim pacientom poskytnú vyšší komfort.

PU LEATHER



FIBER LEATHER





ul. Konopná 2 - Komárňanská cesta, 940 64 Nové Zámky
tel./fax: +421(0)35 / 6426 353
e-mail: info@mediservis.sk

www.mediservis.sk



Office: Konopná 2, Nové Zámky

Contact: info@mediservis.sk

www.mediservis.sk

+421/ 0917 886 541

+421/ 0917 612 581

+421/ 0908 388 083



Registered office: Via Perola 16, 24021 Albino, Bg - Italy

Headquarters: Via San Carlo 33/35, 24029 Vertova, Bg - Italy

Ph: +39 (0)35 5295636 | info@simplesmart.it | www.simplesmart.it

